



COBERTURAS COM PRATA NO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS



COBERTURAS UTILIZADAS

As coberturas com prata na sua composição são as mais utilizadas, devido a sua ação antimicrobiana e contribuição no processo de cicatrização. São exemplos destas:

Sulfadiazina de prata 1% em pomada;

Prata iônica em Hidrofibra;

Prata iônica em alginato de cálcio/carboximetilcelulose;

Prata nanocristalina em rayon poliéster


As infecções em queimaduras são frequentes, por esta razão, coberturas com propriedades antimicrobianas apresentam destaque.

SULFADIAZINA DE PRATA 1% EM POMADA

É uma das coberturas mais usadas. É de baixo custo, porém requer troca diária, o que traz desconforto e dor para a pessoa que sofreu queimadura.

Composição: Sulfadiazina de prata 1%.

Como usar: aplicar a pomada diretamente sobre a lesão ou impregnada em gaze rayon ou tecido morim (algodão + poliéster), ocluir com compressa de tecido algodonado e ataduras.

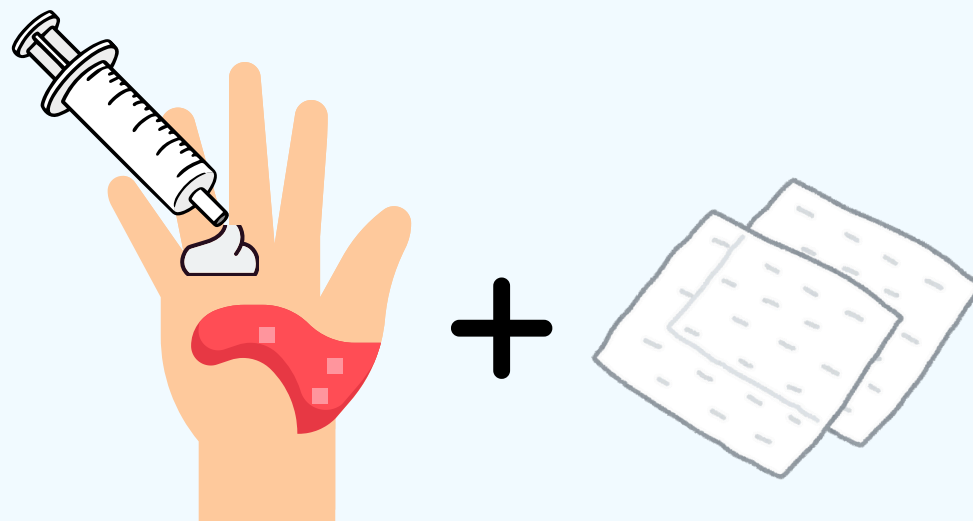

PRATA IÔNICA EM HIDROFIBRA

Cobertura não aderente, de alta absorção de exsudato. Uma das mais utilizadas, visto que sua troca pode ser realizada em até 7 dias.

Composição: duas camadas de hidrofibra 100% carboximetilcelulose sódica, costurado com fibras de celulose regenerada, altamente resistente e prata iônica.

Indicações: queimaduras de 1º e 2º grau.

Como usar: colocar diretamente sobre o leito da ferida, com sobreposição de aprox. 1cm ou 1cm além da margem da lesão. Troca em 7 dias ou conforme saturação. Ocluir com compressa de tecido algodonado e ataduras.




PRATA IÔNICA EM ALGINATO DE CÁLCIO/CARBOXIMETILCELULOSE

Cobertura não aderente, de alto poder de absorção e de propriedade hemostática

Composição: hidroalginato de cálcio, carboximetilcelulose e prata iônica.

Indicações: queimaduras de 1º e 2º grau.

Como usar: colocar diretamente na ferida, com sobreposição mínima nas bordas da ferida. Permanece por até 7 dias ou conforme saturação. Ocluir com compressa de tecido algodonado e ataduras.

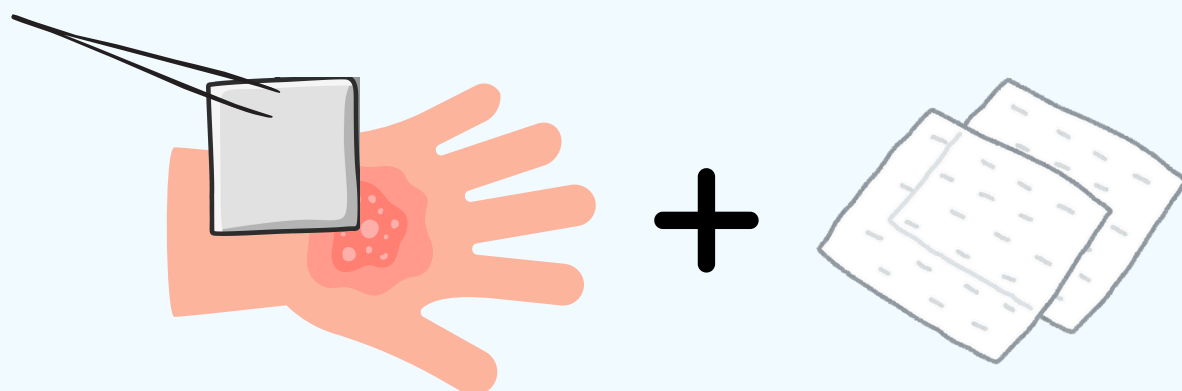

PRATA NANOCRISTALINA EM RAYON POLIÉSTER


Cobertura não aderente. É uma nova tecnologia de curativos à base de prata. Utiliza a nanotecnologia para liberar grupos de partículas de prata continuamente na lesão, acelerando o processo de epitelização e formando uma barreira antimicrobiana.

Composição: 2 camadas externas de polietileno não aderentes com prata nanocristalina e 1 camada interna de poliéster e rayon absorvente.

Indicações: queimaduras de 1º e 2º grau.

PRATA NANOCRISTALINA EM RAYON POLIÉSTER

Como usar: umedeça o curativo com água destilada estéril antes da aplicação para ativar a liberação da prata. Aplique a cobertura de forma que o lado azul permaneça em contato com o leito da ferida (essa orientação pode variar entre os fabricantes, portanto consulte a bula antes de utilizar a cobertura). Troca a cada 3 dias, de acordo com a orientação do fabricante. Por fim, ocluir com compressas de tecido algodonado e ataduras.

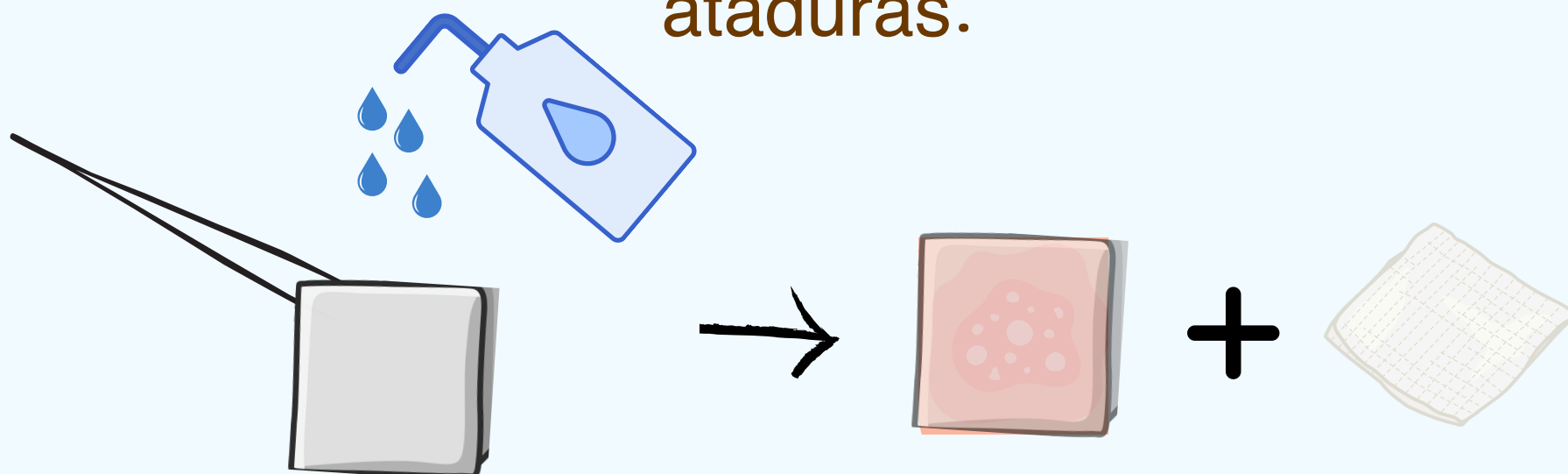


E QUANTO ÀS QUEIMADURAS DE 3º GRAU?

Nas queimaduras de 3º grau há presença de tecidos necrosados. Há necessidade da realização de desbridamento cirúrgico, seguido de enxertia.

Em queimaduras de 3º grau, vale ressaltar a importância do acompanhamento da equipe multiprofissional, desde o planejamento cirúrgico até a completa cicatrização, visando a preservação e/ou ganho de funcionalidade e melhora da qualidade de vida durante todo o processo de reabilitação.

Gostou do conteúdo?
Curta, comente, compartilhe e salve para
quando precisar!

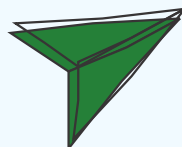

REFERÊNCIAS



Acesse aqui as referências dessa postagem!